
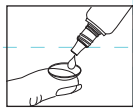


# blink® contacts lindrende øjendråber rauhoittavat silmätipat 10ml

## TOP FRONT

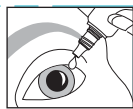

### DA Opriskende for kontaktlinsebrugere, mod tørre, trætte øjne

Disse blide og virkeligt effektive øjendråber er specielt sammensat til kontaktlinsebrugere og lindrer og forfrisker tørre, trætte øjne. Velegnet til alle kontaktlinser, uden at linserne behøver tages ud først.

#### Brugsanvisning

- Anbring 1 eller 2 dråber i det irriterede øje efter behov
- Blink flere gange for at skylle øjet
- Kan bruges så tit, det er nødvendigt
- Du behøver ikke at tage linserne ud
- For ekstra komfort kan du placere 1 eller 2 dråber på hver linse, for den sættes i øjet

Til brug sammen med alle typer kontaktlinser

#### Forsigtighedsforanstaltninger

- Må ikke anvendes, hvis den manipulations sikre forsegling er brudt eller mangler
- Oplysning må ikke indtages
- Produktet må ikke bruges, hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne
- Lad ikke beholderspidsen røre ved nogen overflader, den kan blive forurenset, og undgå direkte kontakt med øjet
- Luk flasken tæt til umiddelbart efter brug
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Opbevares mellem 5-25 °C
- Linsers må ikke skylles med hanevand
- Kasser eventuelt ubrugt væske 45 dage efter åbning af flasken

Hvis du stadig har problemer, bedes du drøfte det med din øjenlæge eller kontaktlinsespecialist.

#### Indeholder:

Natriumhyaluronat - 0,15%  
OcuPure® konserveringsmiddel - 0,005%  
Kalciumchlorid (dihydrat)  
Kaliumchlorid  
Natriumchlorid  
Boratbuffer  
Magnesiumchlorid  
Renset vand

#### Symboler • Kuvamerkit

Se brugsanvisningen Tutustu käyttöohjeisiin	Producent Valmistaja	25°C Temperaturgrænse Lämpötilarajoitus
STERILE A Steril. Aseptisk teknik Steriili. Aseptinen tekniikka	LOT Batchkode Eräkoodi	Anvendes inden Käytettävä ennen
Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut	Kasser eventuelt ubrugt væske 45 dage efter åbning af flasken	Håvittä kaikki jäljellä oleva neste 45 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran

CE 0123 STERILE A

AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
blink, blink contacts and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

### FI Virkistävät piilolinssien käyttäjien kuivia, väsyneitä silmiä

Erityisesti kehitetty piilolinssien käyttäjille; hellettä ja erittäin tehokkaita silmätipat rauhoittavat ja virkistävät kuivia, väsyneitä silmiä. Sopii kaikille piilolinssille, eikä piilolinssijä tarvitse ottaa ensin pois.

#### Käyttöohjeet

- Laita tarvittaessa 1–2 tippaa oireilevaan silmään
- Räpyttele muutaman kerran silmien huuhomiseksi
- Voidaan käyttää usein, aina tarvittaessa
- Piilolinssijä ei tarvitse ottaa pois
- Mukavuuden lisäämiseksi laita 1–2 tippaa kummallekin piilolinssille ennen kuin laitat linsit silmiin

Kaikentyyppisille piilolinssille

#### Varoitimet

- Ei saa käyttää, jos avaamattomuuden osoittava sinetti on rikki tai se puuttuu kokonaan
- Nestettä ei saa niellä
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin aineosalle
- Tartunnan välttämiseksi älä koske tippapullon kärjellä mitään pintoja ja välttä koskettamasta silmiä
- Sulje pullo tiukasti heti käytön jälkeen
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen
- Ei lasten ulottuville
- Säilytä 5–25 °C:ssa
- Älä huuhteile piilolinssijä vesijohtovedellä
- Hävittä kaikki jäljellä oleva neste 45 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran


Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä silmääläkärin.

#### Sisältö:

Natriumhyaluronatti - 0,15%  
OcuPure® säilöntäaine - 0,005%  
Kalsiumkloridi (dihydraatti)  
Kaliumkloridi  
Natriumkloridi  
Boraattipuskuri  
Magnesiumkloridi  
Puhdistettu vesi

# blink® contacts lindrende øyedråper lindrande ögondroppar 10ml

## TOP BACK

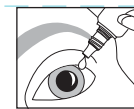

### NO Frisker opp tørre og trette øyne for kontaktlinsebrukere

Disse lindrende og effektive øyedråpene er spesielt utviklet til bruk sammen med kontaktlinser. De lindrer og frisker opp tørre, trette øyne. Passer til alle typer kontaktlinser. Du behøver ikke ta dem ut først.

#### Brugsanvisning

- Ha 1 til 2 dråper på hvert øye etter behov
- Blink flere ganger for å vaske øyet
- Brukes så ofte du har behov for det
- Du behøver ikke ta ut kontaktlinsene
- Ha 1 til 2 dråper på hver kontaktlinse før de settes inn for ytterligere velvære

Kan brukes sammen med alle typer kontaktlinser

#### Forholdsregler

- Må ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler
- Ikke svelg oppløsningen
- Må ikke brukes hvis du er allergisk overfor noen av ingrediensene
- For å unngå forurensning må du ikke la beholderspissen komme i kontakt med noen overflate, og unngå kontakt med øyene
- Skru lokket godt på flasken umiddelbart etter bruk
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Oppbevares mellom 5 °C og 25 °C
- Kontaktlinsene må ikke skylles under springen
- Kast øjenværende oppløsning 45 dager etter at flasken ble åpnet

Rådfor deg med optikeren hvis du fortsatt har problemer.

#### Inneholder:

Natriumhyaluronat - 0,15 %  
OcuPure® konserveringsmiddel - 0,005 %  
Kalsiumklorid (dihydrat)  
Kaliumklorid  
Natriumklorid  
Boratbuffer  
Magnesiumklorid  
Renset vann

#### Symboler

Se brugsanvisning Se brugsanvisningen	Producent Tilverkare	25°C Temperaturbegrensning Temperaturgräns
STERILE A Steril-Aseptisk teknik Steril. Aseptisk teknik	LOT Batch-kode Partinummer	Brukes innen Används före
Må ikke brukes om emballasjen er skadet Använd inte om förpackningen är skadad	Kast gjenværende oppløsning 45 dager etter at flasken ble åpnet	Kasserera all överbliven vätska 45 dagar efter det att flasken öppnats

AM70487FL13D  
Revision Date: 04/2018

### SV Fräschar upp torra, trötta ögon hos kontaktlinsanvändare

Dessa skonsamma och högeffektiva ögondroppar är speciellt utformade för kontaktlinsanvändare och lindrar och fräschar upp torra, trötta ögon. Passar alla kontaktlinser utan att du behöver ta ut linserna först.

#### Brugsanvisning

- Placera 1 eller 2 droppar i det påverkade ögat efter behov
- Blinka flera gånger för att skölja ögat
- Kan användas så ofta som det behövs
- Linserna behöver inte tas ut
- För extra komfort, placera 1 eller 2 droppar på varje lins innan de sätts in

Kan användas med alla typer av kontaktlinser

#### Försiktighetsmått

- Använd ej om säkerhetsförseglingen är bruten eller saknas
- Svälj inte lösningen
- Använd inte lösningen om du är allergisk mot något innehållsämne
- Undvik kontamination genom att aldrig låta behållarens spets vidröra någonting och undvik att komma i kontakt med ögonen
- Förslut flaskan noggrant direkt efter användning
- Använd inte produkten om utgångsdatumet har passerats
- Förvaras utom räckhåll för barn
- Förvaras mellan 5 °C och 25 °C
- Skölj aldrig linserna i kranvatten
- Kasserera all överbliven vätska 45 dagar efter det att flaskan öppnats

Om problemen fortsätter, vänd dig till din ögonspecialist.

#### Innehåller:

Natriumhyaluronat - 0,15 %  
OcuPure® konserveringsmedel - 0,005 %  
Kalciumklorid (dihydrat)  
Kaliumklorid  
Natriumklorid  
Boratbuffert  
Magnesiumklorid  
Renat vatten