

EN *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 eye drops
soothing • moisturising • protecting
blink[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops are formulated to soothe, moisturise and protect dry-feeling or irritated eyes. Combining liposomes, sodium hyaluronate and vitamin E these TRIPLE ACTION eye drops supplement and stabilize the tear film.

Indications
For relief from dry-feeling, sore, watery or irritated eyes.
Suitable for use with contact lenses.

Instructions for use:
Always wash and dry your hands thoroughly before using *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops.

- **Shake before use**
- Instill 1 or 2 drops of *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops in each eye
- Blink to spread over the eye
- Use as often as required
- If you wear contact lenses there is no need to remove them first

Symbols

Consult instructions for use	Manufacturer	Batch code	Use by	25°C 5°C Temperature limitation
Sterile. Aseptic technique	Do not use if package is damaged	Use within 90 days of first opening the bottle		

DA *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 øjendråber
lindre • fugter • beskytter
blink[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber er formuleret til at lindre, fugte og beskytte tørre og irriterede øjne. Ved at kombinere liposomer, natriumhyaluronat og E-vitamin supplerer og stabiliserer disse troldobehvirkende øjendråber tårerfilmen.

Indikationer:
Til lindring af tørre, smertende, rindende eller irriterede øjne.
Egnet til brug med kontaktlinser.

Brugsanvisning:
Vask og tør altid dine hænder grundigt, før du anvender *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber

- **Ryst før brug**
- Dyp 1 eller 2 *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber i hvert øje
- Blink for at sprede over øjet
- Brug efter behov
- Du behøver ikke at fjerne dine kontaktlinser

Symboler

Se brugsanvisningen	Fremstiller	Batchkode	Anvendes inden	25°C 5°C Temperaturgrænse
Steril. Aseptisk teknik	Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget	Kasser eventuelt ubrugt væske 90 dage efter åbning af flasken		

FI *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 -silmätipat
rauhoitavat • kosteuttavat • suojaavat
blink[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätipat on suunniteltu rauhoittamaan, kosteuttamaan ja suojaamaan kuivia ja ärtynyttä silmiä. Liposomija, natriumhyaluronattia ja E-vitamiinia sisältävät kolmitoimiset silmätipat täydentävät ja tasapainottavat kyynelkalvoa.

Käyttöaiheet:
Hesittää kuivia, aristavia, vetistäviä ja ärtynyttä silmiä.
Sopii myös pillolinnsien käyttäjille.

Käyttöohje:
Pese ja kuivaa kädet huolellisesti aina ennen kuin käytät *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja.

- **Ravistettava ennen käyttöä**
- Annostele 1 tai 2 tippaa *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja kumpaankin silmään
- Levitä silmän pinnalle silmäluomia räpäyttämällä
- Käytä aina tarvittaessa
- Jos käytät pillolinnsesä, niitä ei tarvitse ottaa ensin pois

Kuvamerkit

Tutustu käyttöohjeisiin	Valmistaja	Eräkoodi	Käytettävä ennen	25°C 5°C Lämpötilarajitus
Steriili. Aseptinen tekniikka	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut	Hävitä kaikki jäljellä oleva neste 90 päivän kuluessa siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran		

Warnings:

- In case of eye irritation, stop using the product and contact a physician
- Do not use if you are allergic to any of the product components.
- Do not touch the eyes with the tip of the bottle
- Keep away from heat sources, store in a dry place between 5 and 25°C
- Keep out of the reach of children
- **Do not use if tamper-evident seal is broken or missing**
- Do not ingest
- Do not use the product after the expiry date
- Use within 90 days of first opening
- Sterile until first opening

• Close the bottle tightly immediately after use

Contraindications: None known.

Composition: A lax coloured, sterile isotonic, buffered solution pH 7.2 containing liposomes, sodium hyaluronate, vitamin E polyethylene glycol succinate (TPGS), polyethylene glycol 400 (PEG 400), disodium edetate, polyhexanide methylbiguanide and purified water. Does not contain chlorhexidine, thimerosal, benzalkonium chloride, phenoxethanol.

Advarsler:

- I tilfælde af øjenirritation: Hold op med at bruge produktet og søg lægehjælp
- Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogen af produktets komponenter
- Berør ikke øjnene med spidsen af flasken
- Hold produktet væk fra varmekilder. Opbevares tæt ved mellem 5 og 25°C
- Opbevares utilgængeligt for børn
- **Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brutt eller mangler**
- Må ikke indtages
- Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen
- Anvend inden for 90 dage efter åbning
- Steril indtil produktet åbnes
- Luk flasken tæt til lige efter brug

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sammensætning: En gulligfarvet, steril, isotonisk stædpudefølsning med pH 7,2 indeholdende liposomer, natriumhyaluronat, E-vitamin TPGS, polyetylen glykol 400 (PEG 400), diatriumedetat, polyhexanidmetylibiguanid og destilleret vand. Indeholder ikke chlorhexidin, thimerosal, benzalkoniumklorid, phenoxethanol.

Varoituukset:

- Jos silmä ärtyy, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle
- Älä koske silmiin pulion tippakärjellä
- Pidä loitola lämmönlähteistä, säilytä kuivassa paikassa 5–25 °C:ssa
- Ei lasten ulottuville
- **Älä käytä, jos sinetti on murettu tai se puuttuu**
- Ei nautittavaksi
- Tuotetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen
- Käytä 90 päivän kuluessa avaamisesta
- Steriili avaamiseen asti
- Sulje pullo tiivisti heti käytön jälkeen

Vasta-aiheet: Ei tunnettuja.

Koostumus: Pellavan värinen steriili, isotoninen puskuroitu liuos, pH 7,2. Liuos sisältää liposomeja, natriumhyaluronattia, E-vitamiini-polyetyleniglykolsukkinattia (TPGS), polyetyleniglykoi 400 (PEG 400), dinatriumedetattia (EDTA), polyhexanidimetylibiguanidia (PHMB) ja puhdistettua vettä. Ei sisällä klooriheksidiiniä, timerosalia, bensalkoniumkloridia, fenoksetanolia.

NO *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 øyedråper
lindrende • fuktighetsgjørende • beskyttende
blink[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper er sammensatt for å lindre, fukte og beskytte øyne som kjennes tørre eller irriterete. Disse trippelvirkende øyedråpene kombinerer liposomer, natriumhyaluronat og vitamin E for å supplere og stabilisere tårerhinnen.

Indikasjoner:
For lindring av øyne som kjennes tørre, rennende eller irriterete. Egnet til bruk med kontaktlinser.

Brugsanvisninger:
Vask alltid hendene og tørk dem før du bruker *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper.

- **Ristes før bruk**
- Plasser 1 eller 2 dråper med *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper i hvert øye
- Blink for å spre dråpene over hele øyet
- Brukes så ofte det er behov
- Hvis du bruker kontaktlinser, behøver du ikke fjerne dem først

Symbols

Se brugsanvisningen	Produsent	Batch-kode	Brukes innen	25°C 5°C Temperaturbegrensning
Steril. Aseptisk teknikk	Skal ikke brukes om emballasjen er skadet	Kast gjenværende oppløsning 90 dager etter at flasken ble åpnet		

SV *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 ögondroppar
lindrande • fuktande • skyddande
blink[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar är sammansatta för att lindra, fukta och skydda ögon som känns torra eller irriterade. Genom att kombinera liposomer, natriumhyaluronat och vitamin E, kompletterar och stabiliserar dessa trippelverkande ögondroppar tårfilmen.



Användningsområden:
Lindrar när ögonen känns torra, ömma, rinnande eller irriterade. Lämpig för användning med kontaktlinser.

Brugsanvisning:
Tvätta och torka alltid händerna noggrant innan du använder *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar.

- **Omskaka före användning**
- Droppa 1 eller 2 droppar *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar i vardera ögat
- Blinka för att sprida över ögat
- Använd vid behov
- Om du använder kontaktlinser behöver du inte ta ut dem först

Symboler

Se brugsanvisningen	Tillverkare	Partinummer	Används före	25°C 5°C Temperaturgräns
Steril. Aseptisk teknik	Använd inte om förpackningen är skadad	Kassera all överbliven vätska 90 dagar efter det att flaskan öppnats		

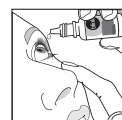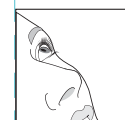

AM70521UN12C
Revision Date: 07/2017
F200 Rev. 18/07/2017

CE 0051

Omisian pharmaceutical
Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy
Distributed by AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland

blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017

XXXXXX XX